

НЕВРАЛГИИ, травмы нервных окончаний

КУРС ЛЕЧЕНИЯ:
до 20 мин ежедневно, 7–14 дней

противовоспалительный, обезболивающий,
противоотечный и регенераторный эффекты

Размер пятна



7–10 мм




Время экспозиции пятна
на воспринимающее поле

1 МИН в шейном отделе
позвоночника,

2 МИН в грудном, пояснично-
крестцовом отделах позвоночни-
ка и по ходу пораженного нерва

+ поля воздействия

- 1 – По 1–5 сегментам спинного мозга, из нервных корешков которых формируется пораженный нерв, по 3 поля на сегмент.
- 2 – По 2 поля на сегмент: между остистыми отростками и с двух сторон на стороне пораженного нерва.
- 3 – По 2–5 полей по ходу пораженного нерва в местах болезненности.

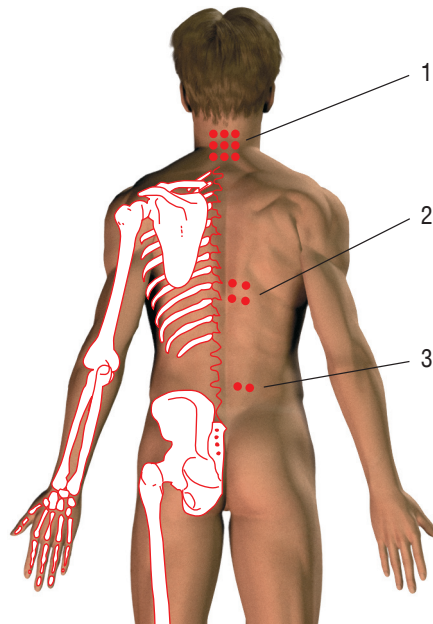

На нервы воздействуют несколькими полями, начиная облучение от сегмента спинного мозга и заканчивая местом наибольшей болезненности или областью повреждения нервного окончания.